



FI
F-801C
Käyttöohjeet
WE-2013-F801C-1

F-801C Ultraäänilaite

VAROITUS

- Älä yritä avata, tai tarkistaa laitteen tarvikkeita tai sen sisäisiä osia. Jos laitteen tarkistus on pakollinen, pyydämme ottamaan yhteyden jakelijaan tai asianmukaisen koulutuksen saaneeseen korjaajaan.
- Älä ikinä käytä laitetta kosteissa tai huonosti tuuletetuissa tiloissa (kylpyhuone, sauna jne.) välttääksesi vahingon syntymisen laitteen sähkökomponenteille.
- Älä käytä laitetta ulkona, sillä altistuminen tietyille sääolosuhteille voi aiheuttaa vahinkoa laitteelle.
- Jos virtajohto vahingoittuu, pyydämme ottamaan yhteyden asianmukaisen koulutuksen saaneeseen ammattilaisesta tai jakelijaan.
- Älä jätä ultraäänilaitteen hoitopäätä päälle ilman valvontaa, sillä ne saattavat ylikuumentua. Ylikuumentuminen voi vahingoittaa laitetta ja lyhentää sen käyttöikää merkittävästi.
- Älä yritä erottaa laitteen tärkeisiä osia sen kumista osista. Yritys erottaa osat saattaa aiheuttaa korjaamaton vahinko laitteeseen.

EU -vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on läpäissyt seuraavat direktiivit:

1. Vaatimukset läpäisty pienjännitedirektiivistä: 2006/95/EY
2. Vaatimukset läpäisty sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta: 2004/108/EY

KIERRÄTYS



Tuotteita, jotka on merkitty tällä merkillä, ei ole tarkoitettu kierrätettäväksi normaalinäin sekajätteenä Euroopan maissa. Varmistaaksesi jätteen oikeanlaisen käsittelyn, kierrätä se paikallisten lakien vaatimin tavoin. Tämä pykälä auttaa säästämään luonnonvaroja ja parantaa luonnonsuojelun standardeja, koskien sähköjätteen käsittelyä.

TERVETULOJA






Kiitos paljon tuotteemme valitsemisesta! Pyydämme lukemaan käyttöohjeet tarkkaan ennen laitteen käyttöä. Voit myös pyytää ammattilaiselta opastusta laitteen oikeaoppisessa käytössä. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista, jotka johtuvat laitteen vääräoppisesta käytöstä.

Yritys pitää oikeuden muuttaa laitteiden yksityiskohtia ilman eri huomautusta. Jos löydätte virheitä näistä ohjeista, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla, jotta voimme korjata ne.



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Laitteen osia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Fyysinen laite voi olla erilainen, kuin pakkauksen kuvissa.

Nro.	TUOTE	REF.	KPL.
1	SILMIEN HOITOPÄÄ	10034	1
2	KASVOJEN HOITOPÄÄ	10035	1
3	KEHON HOITOPÄÄ	10036	1
4	PAALALAITTE	-	1
5	VIRTAJOHTO	-	1

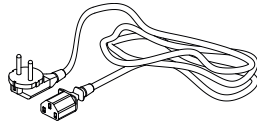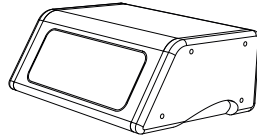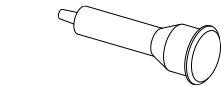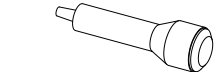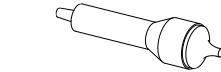

ETUPANEELI/TAKAPANEELI

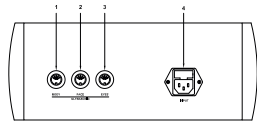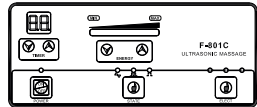

1. Kehon hoitopää
2. Kasvojen hoitopää
3. Silmien hoitopää
4. Virtajohto

KÄYTTÖOHJEET

ENNEN HOITOA:

1. Puhdista hoitoalue käyttäen ihollise tarkoitettuja hoitoinaiteita.
2. Poista ylijäänyt hoitoinaite hyöryttämällä hoitoaluetta 10 minuutin ajan.
3. Puhdista hoitoalue uudelleen poistaaksesi loput epäpuhtaudet, jotta ultraäänilaite ei työnnä liikaa takaisin ihosi sisään.
4. Säilytä koko hoitoalue sopivalla kasvovedellä.
5. Kasvoveden pyyhittyäsi ihosi tulee olemaan täydellisen puhdas ja optimaalisesti suojattu.
6. Levitä välittäjägeeliä hoitoalueella.

HOIDON ALOITUS:

1. Kytke virtajohto takapaneelissa liitäntään, joka näkyy piirroksessa kohtana "4. Virtajohto".
2. Kytke tarvikkeet, kuten "ETUPANEELI/TAKAPANEELI" -kuvitus osoitta.
3. Säädä hoidon vahvuus "ENERGY" -kohdan pykälöiden mukaan LCD-näytöstä. Yleensä hyvä aloitusvoimakkuus on 3-4 pykälää. Pykälöitä lisätä tarpeen mukaan.
4. Valitse haluttu aaltotyyppi painamalla "STATE" -painiketta. Voit valita kolmesta eri aaltotyypistä: jatkuva, katkonainen, tai yhdistelmä.
5. Ota hoitopää käteesi, ja paina "POWER" -painiketta aloittaaksesi hoidon.

6. Hiero aluetta, jolle välittäjägeeli on levitetty, käyttäen pieniä kehämäisiä liikkeitä. Hoitoaika vaihtelee riippuen hoidettavan alueen koosta. Standardin (täydellisen) kasvoalueen hoidon tulisi sisältää 10-15 minuuttia jatkuvaa hierontaa.

7. Hoidon suorittamisen jälkeen sammuta laite ja aseta hoitopää takaisin sen pidikkeeseen.

HUOMOITAVAA

- Välittäjägeelin tulisi antaa vaikuttaa hoitoalueella vähintään 15 minuuttia ennen hoitoa.
- Yleisesti alempia tehoja käytetään kasvoalueen hoitoihin ja korkeampia tehoja vartalohoitoihin.
- Mikäli hoitoalue on pieni tai herkkä käytä silmälle tarkoitettua hoitopäätä ja varmista, että teho on 5-7 pykälää (pykälät näkyvät "ENERGY" tekstin alla LCD-näytössä.) Hoitoaika voidaan vähentää 8-10 minuuttiin.

• Standardi hoitokuuri kestää noin 10 hoitokertaa. Jokaisen hoitopäivän välissä tulisi pitää vähintään 1 välipäivä. Jos kasvohoitoja suoritetaan samaan aikaan tulisi pitää 7 välipäivää hoitokertojen välissä.

VAROITUKSET

- Ei suositella käytettäväksi kuivalle iholle.
- Ei suositella käytettäväksi raskaana olevan naisen vatsan seudulle
- Ei suositella henkilöille, joilla on sydäntahdistin (tällä tarkoitetaan kaikkia laitteita, jotka millään tapaa säätävät sydämen toimintaa).
- Ei suositella henkilöille, joilla on sydänsairaus, tai sydämen vajaatoimintaa.
- Varmista aina laitteen käytön yhteydessä, että alueella, johon hoito kohdistuu on tarpeeksi kosteusvidettä tai seerumia.

• Ultraäänihoito sopii kaikille ihotyypeille. Hoitoaika ja laitteen asetukset voidaan säätää sopimaan jokaiselle ihotyypille. Jos omaat herkin ihon suosittelemme vähentämään hoitoajan 3-5 minuuttiin ja varmistaamaan, että teho-asetukset ovat alimmilla tasoilla hoidon alkaessa.

UKK

Jos laite menee päälle, mutta hoitopäät eivät tunnu toimivan, kokeile seuraavaa:

- Laita pisara vettä hoitopäähän
- Käynnistä laite ja lisää tehoa hitaasti.

TEKNISIÄ TIETOJA

Paino ja koot	Pakkausko (cm)	39x36x18,5
	Brutto paino (kg)	4,8
	Tuotteen koko (cm)	31x17/24x13
Tietoja toiminnasta	Toimintavirta	0 - 3 W/cm2
	Toimintataajuus	1 MHz
	Oletus toiminta-aika	15 min
	Maksimi toiminta-aika	30 min
Tiedot sähkötekniikasta	Nimellisjännite	AC 220V ~ 240V
	Taajuus	50Hz/60Hz
	Nimellisteho	29 W

© 2013 Weelko

MAAHANTUOJA
Nordic Esthetique Trading Oy
Satukummankatu 28
33210 TAMPERE

MYyjÄ
Verkkokauppa Esthetique Hoitolasi - 24/7 -
Email myynti@hoitolasi.fi
GSM +358451792031 FI
www.hoitolasi.fi

• Jos vesi alkaa liikkua ja haittua, on laite toimintakunnossa. Jos vesi pysyy paikallaan laitteessa on mahdollisesti vikaa.

Laite ja hoitopäät toimivat, mutta hoidettava ei tunne vaikutusta.

• Varmista, että hoitoalueella on tarpeeksi välittäjägeeliä.

KUNNOSSAPITO

• Hoitopäät tulee puhdistaa aina käytön jälkeen käyttäen puhdasta, kädenlämpöistä vettä ja pehmeää riepua. Puhdistuksen jälkeen hoitopäät tulee desinfioida sopivalla desinfiointiainella. Hoitopäät tulee säilyttää niille tarkoitetuissa telineissä. Puhdista hoitopäät aina ennen hoitoa.

• Älä ikinä upota hoitopäitä mihinkään nesteeseen!

TARVIKKEET

REF.	KUVAUS
10034	SILMIEN HOITOPÄÄ
10035	KASVOJEN HOITOPÄÄ
10036	KEHON HOITOPÄÄ