

Inhaltsverzeichnis/ Table of Contents

- 1 Warnung und Vorsichtsmaßnahmen/Warning and Cautions
- 2 Teile und Zubehör/Composition
- 3 Bedienung des Gerätes/Operating the System
- 4 Anwendungshinweise/Indications for Use
- 5 Kontraindikationen/Contraindications
- 6 Manschetten/Cuffs
- 7 Technische Daten/Specifications
- 8 Fehlerbehebung/Troubleshooting
- 9 Garantie/Warranty
- 10 Kontaktinformationen/Contact information

Warnung und Vorsichtsmaßnahmen/Warning and Cautions

1. Bitte lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.
2. Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinem Druck aus.
3. Zerlegen oder zerstören Sie dieses Produkt nicht.
4. Verwenden Sie ausschließlich nur die originalen Manschetten und das originale Netzteil.
5. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, legen Sie ein isolierendes Tuch zwischen Manschette und Haut.
6. Verwenden Sie die elektrischen Teile nicht, wenn sie beschädigt oder undicht sind.
7. NICHT unbeaufsichtigt lassen, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird.
8. Bitte bewahren Sie diese Anleitung ordnungsgemäß auf. Wenn Sie eine Reparatur benötigen, wenden Sie sich zur Reparatur an den Händler oder das Einkaufsbüro.
1. Please read the instruction carefully before use.
2. Do not drop or weigh heavily on this product.
3. Do not disassemble or destroy this product.
4. Do not use non-original cold compress pad and power adapter.
5. When using this product, place an insulation pad between the cuff and the skin.
6. Do not reuse the electrical parts when they are damaged or leaking.
7. Do not let children or old people who cannot take care of themselves use it alone.
8. Please keep this instruction property. If you need repair, please contact the dealer or the purchasing office for repair.

Teile und Zubehör/Composition

① Kühler/Cooler	
② Anschlussschlauch/ Connector Hose	
③ Netzteil/AC Adapter	

④ Manschette/Cuff



⑤ Tragetasche/ Carry Bag



⑥ Benutzerhandbuch/ User Manual




Bedienung des Gerätes/Operating the System

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf, um das Fach des Kühlers zu öffnen. Füllen Sie den Wassertank bis zur angegebenen Markierung der Füllstandsanzeige (siehe Etikett auf der Innenseite des Kühlers). Stellen Sie sicher, dass NICHT weniger Wasser als bis zu der Markierung „MIN“ auf der Füllstandsanzeige eingefüllt wurde. Abhängig von Ihrem Bedarf, fügen Sie dem Kühler Eis hinzu. Dann schließen Sie die Tür.

1. Push the door release button to open the cooler door, add water to fill-line indicated on label within the cooler. DO NOT LESS THAN THE WATER LINE. Add ice to cooler depend on your requirement. Then close the door.




2. Legen Sie die gewünschte Manschette an. Nicht direkt auf die Haut auftragen. Benutzen Sie bitte ein isolierendes Tuch zwischen der Manschette und der Haut.
2. Apply the selected cuff (cuff as example, please see the Cuffs. Do not apply directly to skin), please add an isolation pad between the cuff and the skin.

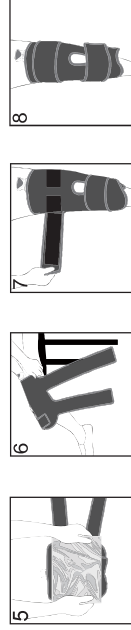


3. Verbinden Sie den Anschluss Schlauch zuerst mit dem Kühler an und danach mit der Manschette. Schließen Sie das Netzteil in eine Steckdose.

3. Connect the hose connector to the front of cooler first, and then plug the other end of hose connector to the cuff. Connect the AC adapter to the cooler, then plug in the AC adapter.

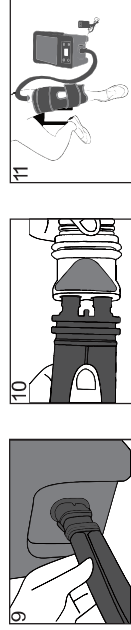


13

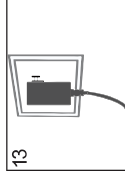



4. Drücken Sie die  -Taste ca. 3-5 Sekunden lang. Der Bildschirm sollte aufleuchten und Begrüßung/Welcome anzeigen.
4. Press the  button about 3-5 seconds, the screen should light up and show Welcome.
5. Drücken Sie die  Taste  um das Programm / den Druck auszuwählen.
5. Press the  or  button to choose the mode/pressure.

Programm/ Mode	Druck/ Pressure	Laufzeit(min)/ Time on(min)	Ruhezeit(min)/ Time off(min)	Hinweis
1		20	20	Programm Zeit des ausgewählten Programms. Es gibt insgesamt 9 Programme.
2	Niedrig/Low	40	40	
3		60	60	Druck Es gibt drei Ebenen: niedrig, mittel und hoch, Druckwert in der Manschette, der durch den Wasserfluss erzeugt wird.
4		20	20	
5	Medium/Mid	40	40	Laufzeit Zeit des aktiven Kalteindrucks.
6		60	60	
7		20	20	Ruhezeit Pausierte Zeit zwischen Kompressionszyklen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
8	Hoch/High	40	40	
9		60	60	

6. Drücken Sie die  -Taste, um den Kühler zu starten oder zu unterbrechen.
6. Press the  button to play or pause the cooler.
7. Drücken Sie die  -Taste ca. 3-5 Sekunden, um den Kühler auszuschalten.
7. Press the  button about 3-5 seconds to turn off the cooler.

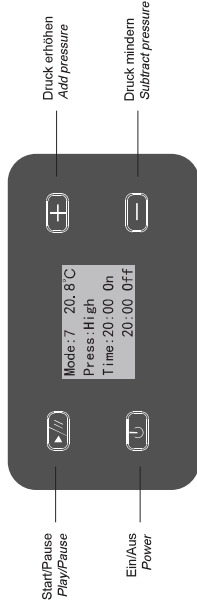

8. Heben Sie nach dem Gebrauch die Manschette an und lassen Sie diese durch Drücken das Wasser aus der Manschette ab und wischen Sie diese ab. Gießen Sie das restliche Eis und Wasser aus dem Kühltank aus.
8. After using, raise the cuff and drainage out the water from the cuff by squeezing it, and then wipe off. Pour out the ice and water from cooler.

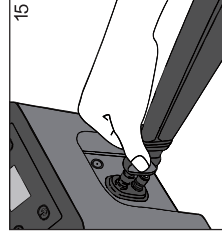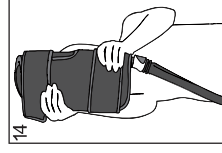

Anwendungshinweise/Indications for Use

Das Pulsalktekompressionstherapie-system wird hauptsächlich zur postoperativen Versorgung und bei akuten Verletzungen eingesetzt, um Ödeme, Schwellungen und Schmerzen zu reduzieren. Es kann in Krankenhäusern, Ambulanzen, beim Sporttraining und zu Hause unter Anleitung eines Arztes eingesetzt werden.


Pulse cold compression therapy system is mainly used for postoperative care and acute injury to reduce edema, swelling and pain. It can be used in hospitals, outpatient clinics, sports training, and at home under the guidance of a medical professional.

Kontraindikationen/Contraindications


1. Schwangere, Patienten mit Bluthochdruck, Diabetes und Kreislauferstörungen, verwenden es bitte nur nach Rücksprache mit einem Arzt.
2. Nicht auf offenen Wunden verwenden.
3. Nicht verwenden, wenn Sie kalte Kompressen nicht vertragen.
4. Menschen mit Gefäßerkrankungen sollten dieses Produkt nicht verwenden.
 1. Pregnant women, patients with hypertension, diabetes and circulatory disorders, please use it after consulting a doctor.
 2. Do not use on the site with open wound.
 3. Do not use if you are intolerant of cold compress.
 4. People with vascular diseases should not use this product.

Manschetten/Cuffs


Schulter
Shoulder

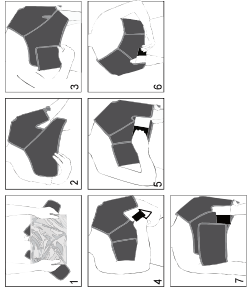

Knie
Knee

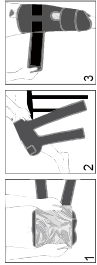

Sprungelenk
Ankle

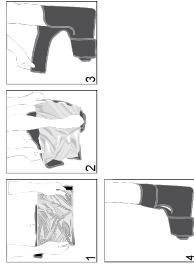

Spezifikationen/Specifications

Wechselstrom/AC power: 100-240V, 50/60Hz
Gleichstromausgang/DC Output: 12V/2A
Druckniveau/Pressure level: 60mmHg-120mmHg
Temperaturniveau/Temperature level: 0°C-25°C
Geräusch/Noise: unter/below 50 Dezibel/decibels
Gewicht/Weight: 1.78kg leer/empty
Kapazität/Capacity: maximal/maximum 3.6L

Fehlerbehebung/Troubleshooting

Der Kühler lässt sich nicht einschalten Cooler will not turn on	1. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel des Netzteils fest an der Vorderseite des Kühlers eingesteckt ist. 1. Please make sure that the power plug is normally inserted into the power supply. 2. Please make sure that the AC adapter is well connected to the front of the cooler.
Auf der Oberfläche der Verpackung befindet sich Wasser There is water on the surface of the wrap	1. Bitte vergewissern Sie sich, ob es sich um Kondenswasser handelt. 2. Falls die Manschette undicht ist, verwenden Sie diese nicht mehr. Bitte kontaktieren Sie sofort den Kundendienst zwecks Reparatur. 1. Please make sure whether it is condensed water. 2. If the wrap leaks, do not use it. Please immediately contact the distributor for repair.
Lautes Geräusch während des Betriebs Loud noise during work	1. Lassen Sie es für 2-3 Minuten lauten, das Geräusch wird reduziert. 2. Wenn das Geräusch immer sehr laut ist, bitte nicht mehr verwenden und kontaktieren Sie den Kundendienst für eine Wartung. 1. Running for 2-3 minutes, the noise will be reduced. 2. If the noise is always very loud, please stop using it and contact the distributor for maintenance.

Garantie/Warranty

1. Ohne ersichtliche Schäden gewährt das Unternehmen, dass die Garantiezeit für alle Teile des Produkts ein Jahr beträgt.
2. Bitte bewahren Sie die Garantiekarte und den Kaufbeleg des Produkts auf.
3. Füllen Sie die Produktgarantiekarte sorgfältig aus und senden Sie die Garantiekarte, den Kaufbeleg und die Produkte innerhalb eines Jahres kostenlos an die Empfängeradresse auf der Garantiekarte.
1. Without any artificial damage, the company promises that the warranty period of all parts of the product is one year.
2. Please keep the warranty card and purchase certificate of the product.
3. Carefully fill in the product warranty card, and mail the warranty card, purchase certificate and products to the recipient address on the warranty card for free maintenance for one year.

Kontaktinformationen/Contact information

Manuelle Release-Zeit: 2019.3.15
Hersteller: Chengdu Cryo-Push Medical Technology Co., Ltd.
Unternehmensvertreter: Peiyong Zhang
Adresse: 105, Zone 20, Huayin Industrial Port, No. 618, Keln Road (West), Wenjiang District, Chengdu, Sichuan, 611137, P.R.China
Kundendienst: Chengdu Cryo-Push Medical Technology Co., Ltd.
Tel: +86 28 8503 9149 Fax: +86 28 8523 9082 Web: <http://www.cryopush.com>

Importeur & Vertreiber

K-Active Europe GmbH
Frohnradstrasse 2, 63768 Hoesbach, Germany
Tel: +49 (0) 6021 62998-100 Fax: +49 (0) 6021 62998-999
E-mail: info@k-active.com

CRYOPUSH

BY K-Active

KÄLTETHERAPIESYSTEM MIT PULSKOMPRESSION
PULSE COMPRESSION COLD THERAPY SYSTEM

CRYOPUSH

CRYOPUSH



K-Active

