

Sisällysluettelo




1. Varoitukset ja huomautukset
2. Osat ja lisävarusteet
3. Laitteen käyttö
4. Sovelluksen huomautukset/käyttöohjeet
5. vasta-aiheet
6. mansetit
7. Tekniset tiedot
8. Vianetsintä
9. Takuu
10. Yhteystiedot

Varoitukset ja huomautukset

1. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
2. Älä pudota tätä tuotetta tai paina sitä voimakkaasti.
3. Älä pura tai tuhoa tätä tuotetta.
4. Käytä vain alkuperäisiä mansetteja ja alkuperäistä virtalähdettä.
5. Kun käytät tätä tuotetta, aseta eristävä liina mansetin ja ihon väliin.
6. Älä käytä sähköisiä, jos ne ovat vaurioituneet tai vuotavat.
7. ÄLÄ jätä laitetta ilman valvontaa, kun käytät laitetta lasten tai vammaisten henkilöiden lähelle.
8. Säilytä tämä ohje oikein. Jos tarvitset korjausta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ostotoimistoon korjausta varten.


Osat ja tarvikkeet

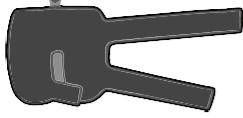① jäähdytin	
② Liitäntäletku	
③ Virtalähde/AC-adaptteri	


④ mansetit	
⑤ kantolaukku	
⑥ Käyttöohje	

Laitteen käyttö



1. Avaa jäähdytyslokeron painamalla vapautuspainiketta. Täytä vesisäiliö tasolmaisimen merkkiin asti (katso jäähdyttimen sisäpuolella oleva tarra). Varmista, ettet täytä vähemmän vettä kuin tasomittarin MIN-merkki. Lisää jäätä jäähdyttimen tarpeittesi mukaan. Sulje sitten luukku.

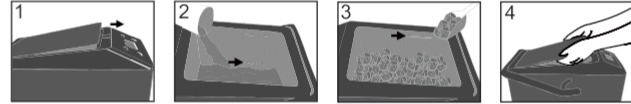


2. Pue haluamasi mansetti. Älä levitä suoraan iholle. Käytä eristävää kangasta mansetin ja ihon välissä

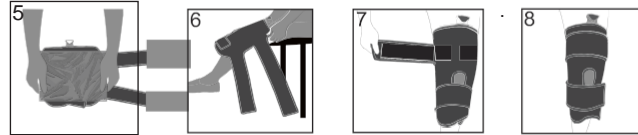

3 Liitä liitäntäletku ensin jäähdyttimeen ja sitten mansettiin. Liitä virtalähde jäähdyttimeen ja liitä sitten verkkolaite pistorasiaan

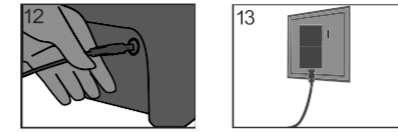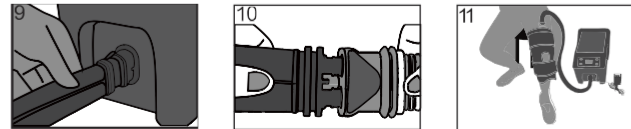


4. Paina painiketta  noin 3-5 sekuntia. Näyttöön syttyy valo ja ilmoitus Wellcome.



5. Paina   -painikkeita valitaksesi ohjelman/paineen.



Ohjelma Mode	Paine Pressure	hoitoaika min Time on (min)	Keskeytys min Time off (min)	ilmoitus
1	matala/Low	20	20	Ohjelma Näyttää valitun ohjelman. Ohjelmaa on yhteensä 9. Paine Tasojen on kolme: matala, keskitaso ja korkea. Vesivirtauksen synnyttämä painearvo mansetissa.
2		40	40	
3		60	60	
4	Medium/Mid	20	20	Hoitoaika Aktiivisen kylmäpaineen aika. keskeytysaika Keskeytetty aika hoitojaksojen välillä, kun laite on päällä.
5		40	40	
6		60	60	
7	korkea/High	20	20	
8		40	40	
9		60	60	


6. Paina painiketta  käynnistääksesi tai pysäyttääksesi jäähdyttimen.



7. paina painiketta  3-5 sekunnin ajan sammuttaaksesi jäähdyttimen



Käynnistä
/paussi
Play/Pause

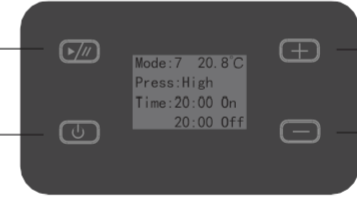


lisää painetta
Add pressure

päällä/
Power

Vähennä
painetta
Subtract
pressure

8. Käytön jälkeen nosta mansetti ja valuta vesi pois mansetista puristamalla ja pyyhkimällä. Kaada jäljellä oleva jää ja vesi pois jäähdyttimen säiliöstä.

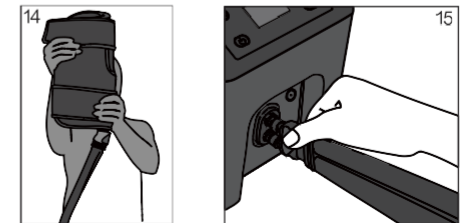

Vasta-aiheet ja huomautukset


Pulssikyymäkompressiohoitojärjestelmää käytetään pääasiassa leikkauksen jälkeisessä hoidossa ja akuutissa vammassa turvotuksen, turvotuksen ja kivun vähentämiseksi. Sitä voidaan käyttää sairaaloissa, poliklinikoissa, urheiluharjoittelussa ja kotona terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.

Vasta-aiheet


1. Raskaana olevat naiset, potilaat, joilla on korkea verenpaine, diabetes ja verenkiertohäiriöitä, käytä sitä vain lääkärin kanssa neuvoteltuasi.
2. Älä käytä avoimille haavoille.
3. Älä käytä, jos et siedä kylmää kompressiota.
4. Henkilöiden, joilla on verisuonisairauksia, ei tule käyttää tätä tuotetta.

Mansetit


Olkapää Shoulder

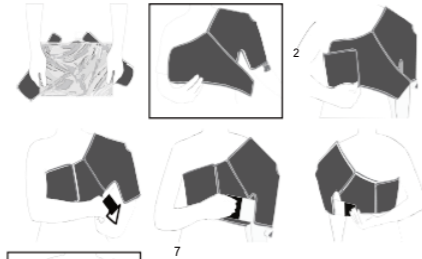

Polvi Knee

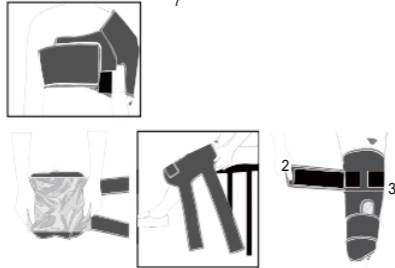

Niikka Ankle

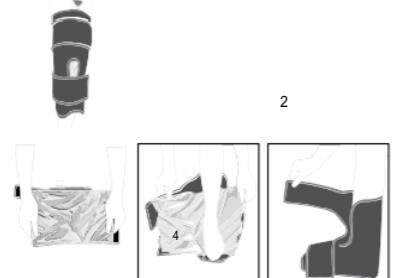

Tekniset tiedot

Vaihtovirta : 100-240V, 50/60Hz Tasavirta : 12V/2A Painetaso : 60mmHg-120mmHgLämpötilataso: 0°C-25°C Melu: alle 50 desibeliäPaino: 1.78kg tyhjänä Tilavuus: Maksimi 3.6L

Ongelmien kartoittaminen

Jäähdytін ei käynnisty	<ol style="list-style-type: none">1. Varmista, että verkkolaite on kytketty toimivaan pistorasiaan.2. Varmista, että verkkolaitteen kaapeli on kytketty kunnolla jäähdyttimen etuosaan.
Pakkauksen pinnalla on vettä	<ol style="list-style-type: none">1. Varmista, onko kyseessä kondensioivettä.2. Jos mansetti vuotaa, lopeta sen käyttö. Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun korjausta varten.
Kova ääni käytön aikana	<ol style="list-style-type: none">1. Anna sen käydä 2-3 minuuttia, jolloin melu vähenee.2. Jos ääni on aina erittäin kovaa, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä asiakaspalveluun huoltoa varten

Takuu

1. Ilman näkyviä vaurioita yritys myöntää tuotteen kaikille osille yhden vuoden takuun.
2. Säilytä tuotteen takuukortti ja ostokuitti.
3. Täytä tuotteen takuukortti huolellisesti ja lähetä takuukortti, ostokuitti ja tuotteet vuoden kuluessa maksutta takuukortissa olevaan vastaanottajan osoitteeseen.

Valmistajan yhteystiedot

Valmistaja: Chengdu Cryo-Push Medical Technology Co., Ltd.
Yrityksen edustaja: Peiyong Zhang
Osoite: 105, Zone 20, Huayin Industrial Port, No. 618, Kelin Road (West), Wenjiang District, Chengdu, Sichuan, 611137, P.R.China
Asiakaspalvelu: Chengdu Cryo-Push Medical Technology Co., Ltd.
Puh: +86 28 8503 9149 Fax: +86 28 8523 9082 Web: <http://www.cryopush.com>

Jakelija:

K-Active Europe GmbH
Frohnradstrasse 2, 63768 Hoesbach, Germany
Tel: +49 (0) 6021 62998-100 Fax: +49 (0) 6021 62998-999
E-mail: info@k-active.com

Myynti ja maahantuonti Suomessa:

AlfaCare Finland Oy/MEDFIT
Iso Kylätie 47
04130 Sipoo
puh. 09-61500544 email: posti@medfit.fi
www.medfit.fi

CRYOPUSH

BY  K-Active

PULLSSIKOMPRESSIO
KYLÄTERAPIAJÄRJESTELMÄ

CE

CE