



ES

WKB001
Manual de instrucciones
WE-2020-WKB001-1

PRESOTERAPIA

ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de aguas, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

• No utilice el equipo con mujeres embarazadas, pacientes con epilepsia, pacientes con dispositivo de control de ritmo cardíaco (marcapasos) o pacientes con una infección cutánea.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2014/35/EU

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

RECICLAJE

 Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos

ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.



La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

CONTENIDO DEL PAQUETE

• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

| Nº | PRODUCTO | CANT |
|----|------------------------------|------|
| 1 | PIERNA DERECHA | 1 |
| 2 | PIERNA IZQUIERDA | 1 |
| 3 | BRAZO DERECHO | 1 |
| 4 | BRAZO IZQUIERDO | 1 |
| 5 | PIE DERECHO | 1 |
| 6 | PIE IZQUIERDO | 1 |
| 7 | CINTURA | 1 |
| 8 | MANTA CABLES | 1 |
| 9 | TUBOS | 1 |
| 10 | UNIDAD PRINCIPAL | 1 |
| 11 | CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 1 |

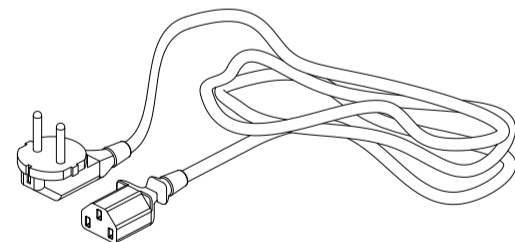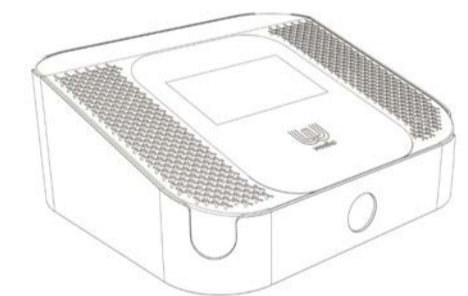

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el cable de alimentación en el panel trasero.


2. Conecte correctamente los tubos en el panel trasero. Siga las indicaciones numéricas.

3. Coloque la manta con los cables en una superficie plana para que el paciente pueda tumbarse. Proteja la manta con un papel desechable para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.

4. Envuelva las prendas alrededor del cuerpo del usuario. Recuerde utilizar un traje desechable debajo del traje de la presoterapia.

5. Encienda el botón en el panel frontal y haga clic en el logo Weelko de la pantalla para proceder a seleccionar los menús deseados.

6. El menú "MODE" permite escoger uno de los cuatro programas. Se recomienda empezar por el programa C y después escoger los otros programas según las necesidades del paciente.

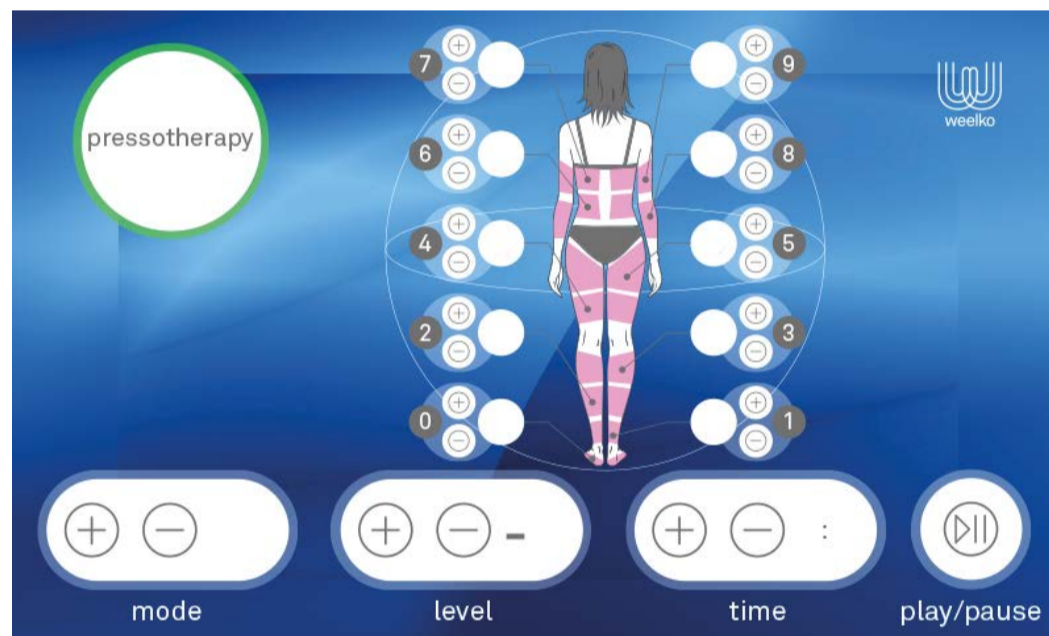

• El programa A infla de la zona 0 a la 9. Desinfla la zona 0 cuando se infla la 1 y desinfla la 1 cuando se infla la 2, así sucesivamente de una extremidad a otra. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el programa.

• El programa B infla de la zona 0 a la 9. Desinfla la zona 0 cuando se infla la 2 y desinfla la 1 cuando se infla la 3, y así sucesivamente de un lado al otro. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el programa.

• El programa C infla de la zona 0 a la 9. Empieza a inflar por la zona 0 y añade la zona 1, seguido de la 2 y así sucesivamente va añadiendo zonas al proceso de inflado. Al final, repite el programa.

• El programa D infla las tres zonas a la vez: piernas, abdomen y brazos desde la extremidad hasta la parte superior.

Si prefiere trabajar zonas independientes sin utilizar ningún programa, el equipo permite escoger cada parte del traje y regular su intensidad de hinchado independientemente. Solamente debe pulsar el botón de la zona y regular la intensidad por medio de las teclas "+" y "-".

7. El menú "LEVEL" permite regular la intensidad del hinchado en tres niveles.

8. El menú "TIME" permite escoger el tiempo de tratamiento. El programa predeterminado es de 30 minutos.

9. Seleccione "PLAY/PAUSE" para empezar o pausar el tratamiento.

MANTENIMIENTO

• Conecte y desconecte los tubos con cuidado para alargar su vida útil. De todas formas, el equipo prevé una manta para almacenar los cables con el fin de evitar conectar y desconectar los cables cada vez. Conecte y desconecte solamente el cable general de la parte trasera.

• Limpie el traje con un trapo húmedo después de cada tratamiento.

PRECAUCIÓN

• Tenga la precaución de no apretar demasiado el traje al cuerpo del paciente, para evitar hacerle daño si la presión del aire es muy fuerte

• Compruebe que todos los tubos están conectados correctamente.

• La presión del aire no debe ser demasiado alta para no causar dolor.

• Cuando la máquina está funcionando, debe haber un profesional que la controle.

• Utilice un protector de celulosa bajo el traje de presoterapia para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.

ACCESORIOS

| |
|------------------|
| PIERNA DERECHA |
| PIERNA IZQUIERDA |
| BRAZO DERECHO |
| BRAZO IZQUIERDO |
| CINTURA |
| PIE DERECHO |
| PIE IZQUIERDO |
| TUBOS |

FICHA TÉCNICA

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pesos y tamaños | Tamaño embalaje (cm) | 66x45x40 |
| | Peso bruto (Kg) | 18,5 |
| | Tamaño consola (cm) | 34x38x15 |
| Características de trabajo | Potencia de trabajo | 50 W |
| | Presión de aire | 0-0,4 kg/cm ² |
| | Flujo de aire | 0-40 L/min. |
| | Ritmo de la presión aire | 0-15 s. |
| | Canales de aire | 10 (20 cámaras) |
| Características eléctricas | Voltaje nominal | 220V ~ 240V |
| | Frecuencia | 50Hz/60Hz |
| | Potencia nominal | 50 W |



EN

WKB001
Instruction Manual
WE-2020-WKB001-1

PRESSOTHERAPY



incorrect operation.

The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

PACKAGE CONTENTS

- These components are subject to change without prior notice.
- Appearance of product may differ from the image.

| No. | PRODUCT | QTY. |
|-----|---------------|------|
| 1 | RIGHT LEG | 1 |
| 2 | LEFT LEG | 1 |
| 3 | RIGHT ARM | 1 |
| 4 | LEFT ARM | 1 |
| 5 | RIGHT FOOT | 1 |
| 6 | LEFT FOOT | 1 |
| 7 | WAIST | 1 |
| 8 | CABLE BLANKET | 1 |
| 9 | TUBES | 1 |
| 10 | MAIN UNIT | - 1 |
| 11 | FEEDER CABLE | - 1 |

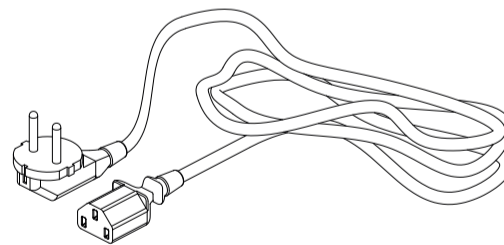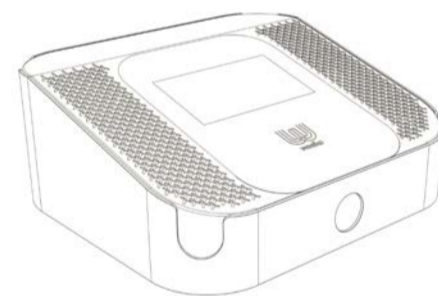

INSTRUCTIONS OF USE

1. Connect the power cord via the rear panel.
2. Connect the tubes properly to the rear panel. Follow the numerical instructions.
3. Place the blanket with the cables on a flat surface so that the patient can lay down on it. Cover the blanket with disposable paper to ensure the best hygienic conditions.
4. Wrap the suit around the user's body. Remember to use a disposable garment underneath the pressotherapy suit.
5. Turn on the power button on the front panel and click on Weelko logo to select the desired menus.
6. The "MODE" menu allows you to choose between four programs. It is recommended to start with C and to select the other programs depending on patient's needs.

adjust its intensity by using the buttons "+" and "-".

7. The "LEVEL" menu allows to adjust 3 inflation intensity levels.
8. The "TIME" menu allows to adjust the treatment time. The default duration is 30 minutes.
9. Press "PLAY/PAUSE" to begin or pause the treatment.

MAINTENANCE

• Connect and disconnect the tubes carefully to extend the product lifetime. However, this device is supplied with a blanket to store the cables so that they are all connected and disconnected at the same time. Only the general power cord at the rear part of the device should be connected and disconnected.

- After use, clean the suit with a wet cloth.

CAUTIONS

- Be careful not to wrap the airbag too tight, to avoid hurting the users when the air is too strong.
- Check that all the tubes are properly connected.
- The air pressure should not be set too high to avoid causing pain.
- When the machine is working, a professional must be next to it controlling it.
- Use a cellulose protector underneath the pressotherapy suit to ensure the best hygienic conditions.

ACCESSORIES

| |
|------------|
| RIGHT LEG |
| LEFT LEG |
| RIGHT ARM |
| LEFT ARM |
| WAIST |
| RIGHT FOOT |
| LEFT FOOT |
| TUBES |

WARNING

• Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components or accessories of the machine. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.

• Never use the unit in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms, etc. to prevent damage to the electrical components of your unit.

• Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.

• If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

• Do not use on pregnant women, on people with pace-makers (any electrical or rhythmic heart-regulating device) or with skin infections.


EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2014/35/EU


2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING

 Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to

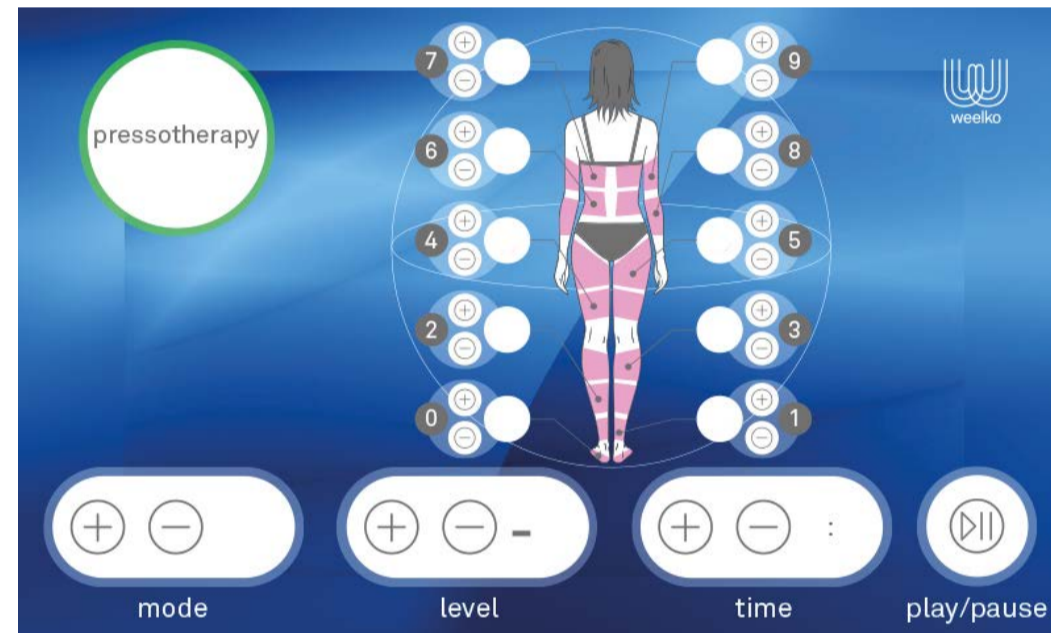

• Mode A fills with air sections from 0 to 9. Section 0 is deflated when section 1 is inflated. Section 1 is deflated when section 2 is inflated and so on from one section to another. At the end of the program, sections from 0 to 9 are inflated at the same time and the program starts again.

• Mode B fills with air sections from 0 to 9. Section 0 is deflated when section 2 is inflated. Section 1 is deflated when section 3 is inflated and so on from one side to another. At the end of the program, sections from 0 to 9 are inflated at the same time and the program starts again.

• Mode C fills with air sections from 0 to 9. First section 0 is inflated, then section 1, later section 2 and so on through all sections. At the end, the program starts again from section 0.

• Mode D fills with air the three sections at the same time: legs, abdomen and arms from bottom to top.

If you don't want to use a concrete mode, the device allows to choose sections separately and to adjust the inflation intensity of each section. You just need to press the area you want to treat and

TECHNICAL SHEET

| | | |
|----------------------------|------------------------|---------------|
| Weights and sizes | Packing size (cm) | 66x45x40 |
| | Gross weight (kg) | 18,5 |
| | Product size (cm) | 34x38x15 |
| Working characteristics | Working power | 50 W |
| | Air pressure | 0-0,4 kg/cm2 |
| | Air flow | 0-40 L/min. |
| | Rhythm of air pressure | 0-15 s. |
| | Air channels | 10 (20 bags) |
| Electrical characteristics | Rated voltage | 220V ~ 240V |
| | Frequency | 50Hz/60Hz |
| | Rated power | 50 W |



FR

WKB001
Mode d'emploi
WE-2020-WKB001-1

PRESSOTHÉRAPIE

n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.



L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

| No. | PRODUIT | QTE. |
|-----|----------------------|------|
| 1 | JAMBE DROITE | 1 |
| 2 | JAMBE GAUCHE | 1 |
| 3 | BRAS DROIT | 1 |
| 4 | BRAS GAUCHE | 1 |
| 5 | BOTTE DROITE | 1 |
| 6 | BOTTE GAUCHE | 1 |
| 7 | TAILLE | 1 |
| 8 | COUVERTURE DES TUBES | 1 |
| 9 | TUYAU | 1 |
| 10 | UNITÉ PRINCIPALE | - 1 |
| 11 | CÂBLE ALIMENTATION | - 1 |

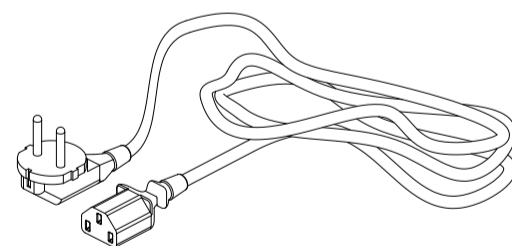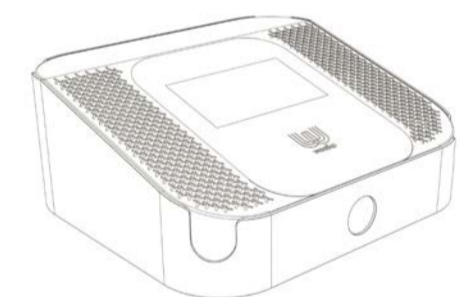

MODE D'EMPLOI

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le panneau arrière.

2. Branchez correctement les tubes sur le panneau arrière. Suivez les indications numériques.

3. Placez la couverture des tubes sur une surface plate pour que le patient puisse s'installer. Protégez la couverture avec un papier jetable afin de garantir les conditions d'hygiène appropriées.

4. Enveloppez le patient dans la robe. Rappelez-vous d'utiliser une robe jetable sous celle de pressothérapie.

5. Allumez l'appareil par le bouton frontal et faites clic sur le logo Weelko de l'écran afin de choisir les menus souhaités. .

6. Le menu "MODE" permet de choisir un des quatre programmes. Il faudrait commencer avec le programme C et après choisir les autres programmes selon les besoins du patient.

indépendante. Il faut seulement appuyer sur le bouton de chaque zone et régler l'intensité au moyen des touches « + » et « - ».

7. Le menu "LEVEL" permet de régler l'intensité de gonflage à trois niveaux.

8. Le menu "TIME" permet de choisir le temps de traitement. Le temps du programme par défaut est de 30 minutes.

9. Appuyez sur "PLAY/PAUSE" pour commencer ou pauser le traitement.

ENTRETIEN

• Branchez et débranchez les tubes avec soin pour élargir leur durée de vie. De toute façon, l'appareil prévoit une couverture pour ranger les tubes afin d'éviter brancher et débrancher les tubes à chaque fois. Branchez et débranchez seulement le fil de raccordement général sur la partie arrière.

• Nettoyez la robe avec un chiffon humide après chaque traitement.

PRÉCAUTIONS

• Faites attention à ne pas serrer le coussin d'air trop fort afin d'éviter de blesser les utilisateurs.

• Vérifiez que tous les tubes sont correctement branchés.

• La pression d'air ne doit pas être trop forte pour éviter toute douleur.

• Lors d'une utilisation de l'appareil, un professionnel doit être présent à tout moment pour contrôler le bon fonctionnement.

• Utilisez une housse de protection en cellulose sous la robe de pressothérapie afin de garantir les conditions d'hygiène appropriées.

ACCESSOIRES

| |
|--------------|
| JAMBE DROITE |
| JAMBE GAUCHE |
| BRAS DROIT |
| BRAS GAUCHE |
| TAILLE |
| BOTTE DROITE |
| BOTTE GAUCHE |
| TUYAU |

ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

• N'utilisez pas l'appareil avec femmes enceintes, patients avec épilepsie, patients avec un stimulateur cardiaque ou patients avec une infection cutanée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU

2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

RECYCLAGE




Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels.

Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous

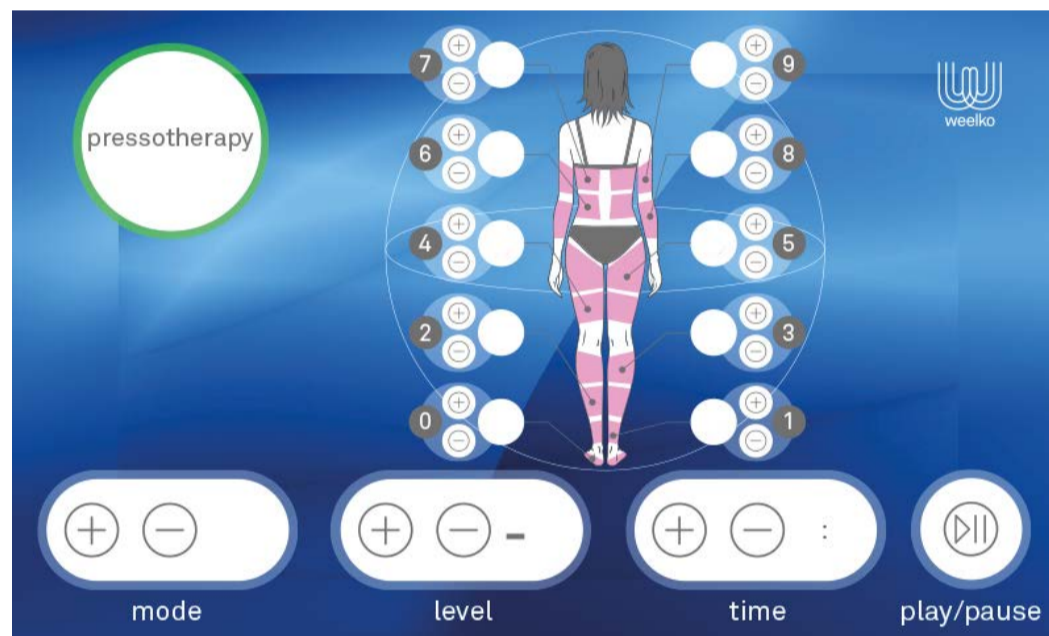

• Le programme A gonfle de la zone 0 à la 9. Il dégonfle la zone 0 quand la zone 1 se gonfle et dégonfle la 1 quand la zone 2 se gonfle, et comme ça successivement d'un bout à l'autre. Au final, il gonfle de la zone 0 à 9 et le programme commence de nouveau.

• Le programme B gonfle de la zone 0 à la 9. Il dégonfle la zone 0 quand la zone 1 se gonfle et dégonfle la 1 quand la zone 3 se gonfle, et comme ça successivement d'un côté à l'autre. Au final, il gonfle de la zone 0 à 9 et le programme commence de nouveau.

• Le programme C gonfle de la zone 0 à la 9. Il commence à gonfler par la zone 0 et il y ajoute la zone 1, après la zone 2 et comme ça il ajoute successivement des zones au procès de gonflage. Au final, le programme commence de nouveau.

• Le programme D gonfle les trois zones au même temps : pieds, jambes, abdomen et bras dès le bout jusqu'à la partie supérieure.

Si vous préférez travailler les zones de façon indépendante sans utiliser aucun programme, l'appareil permet de choisir chaque partie de la robe et régler son intensité de gonflage de façon

SPÉCIFICATIONS

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Poids et taille | Taille de l'emballage (cm) | 66x45x40 |
| | Poids brut (kg) | 18,5 |
| | Dimensions produit (cm) | 34x38x15 |
| Caractéristiques de travail | Puissance de travail | 50 W |
| | Pression d'air | 0-0,4 kg/cm ² |
| | Flux d'air | 0-40 L/min. |
| | Rythme de pression d'air | 0-15 s. |
| | Chenaux d'air | 10 (20 bags) |
| Caractéristiques électriques | Tension nominale | 220V ~ 240V |
| | Fréquence | 50Hz/60Hz |
| | Puissance nominale | 50 W |



DE

WKB001
Bedienungsanleitung
WE-2020-WKB001-1



PRESSOTHERAPIE

Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

PACKUNGSIHALT

- Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.

| No. | PRODUCT | QTY. |
|-----|--------------------|------|
| 1 | RECHTE BEINE | 1 |
| 2 | LINKE BEINE | 1 |
| 3 | RECHTER ARM | 1 |
| 4 | LINKER ARM | 1 |
| 5 | RECHTER FUß | 1 |
| 6 | LINKER FUß | 1 |
| 7 | HÜFTE | 1 |
| 8 | KABEL FÜR DECKE | 1 |
| 9 | SCHLÄUCHE | 1 |
| 10 | HAUPT-EINHEIT | 1 |
| 11 | VERSORGUNGSLEITUNG | 1 |

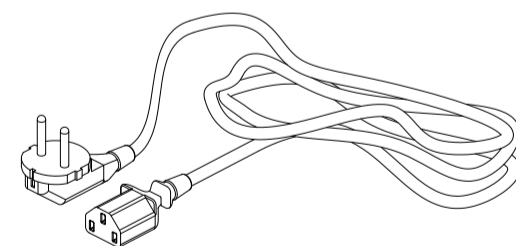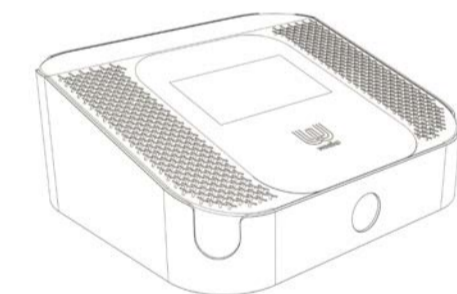

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Das Kabel auf der Rückseite einstecken.
2. Die Schläuche richtig auf der Rückseite einstecken. Die Zahlenanweisungen folgen.
3. Die Decke mit den Kabeln auf eine flache Fläche legen, damit sich der Patient hinlegen kann. Die Decke mit Einwegpapier schützen, um die geeigneten Hygienebedingungen zu garantieren.
4. Wickeln Sie die Teile des Anzuges um den Körper des Patienten herum. Denken Sie daran, einen Einweganzug unter dem Pressotherapie Anzug zu verwenden.
5. Die Taste auf der Frontplatte drücken, um das Gerät einzuschalten und auf dem Weelko Logo des Bildschirms klicken, um die gewünschten Menüs auszuwählen.
6. Das Menü "MODE" ermöglicht, ein von den vier Programmen auszuwählen. Es wird empfohlen mit dem Programm C anzufangen und danach die anderen Programme auswählen je nach Bedarf des Patienten.

Das Programm A bläst die Kammer 0 bis 9 auf. Es bläst die Luft heraus von Kammer 0 wenn die 1 aufgeblasen wird und bläst die Luft heraus von Kammer 1 wenn die 2 aufgeblasen wird, und so weiter von Gliedmaßen zu Gliedmaßen. Am Ende wird es von 0 bis 9 gleichzeitig aufgeblasen und das Programm wird wiederholt.

Das Programm B bläst die Kammer 0 bis 9 auf. Es bläst die Luft heraus von Kammer 0 wenn die 2 aufgeblasen wird und bläst die Luft heraus von Kammer 1 wenn die 3 aufgeblasen wird, und so weiter von einer Seite zu der anderen. Am Ende wird es von 0 bis 9 gleichzeitig aufgeblasen und das Programm wird wiederholt.

Das Programm C bläst die Kammer 0 bis 9 auf. Als erstes wird die Kammer 0 aufgeblasen und die Kammer 1 kommt dazu und so weiter werden die anderen Kammer dazu addiert. Das Programm wird wiederholt.


Das Programm D bläst die drei Kammer gleichzeitig: Beine, Bauch und Arme vom unteren bis zum oberen Teil.

Wenn Sie mit unabhängigen Bereichen ohne Programm arbeiten möchten, ermöglicht das Gerät jedes Teil des Anzuges auszuwählen und die Intensität der Luftfüllung unabhängig zu regulieren. Drücken Sie einfach auf die Taste des Bereiches und die Intensität davon wird mit den Tasten „+“ und „-“, reguliert.

Das Menü "LEVEL" ermöglicht die Regelung der Intensität der Luftfüllung in drei Niveaus.

Das Menü "TIME" ermöglicht, die Behandlungsdauer auszuwählen. Das Standardprogramm dauert 30 Minuten.

"PLAY/PAUSE" auswählen, um mit der Behandlung anzufangen oder die Behandlung zu stoppen.

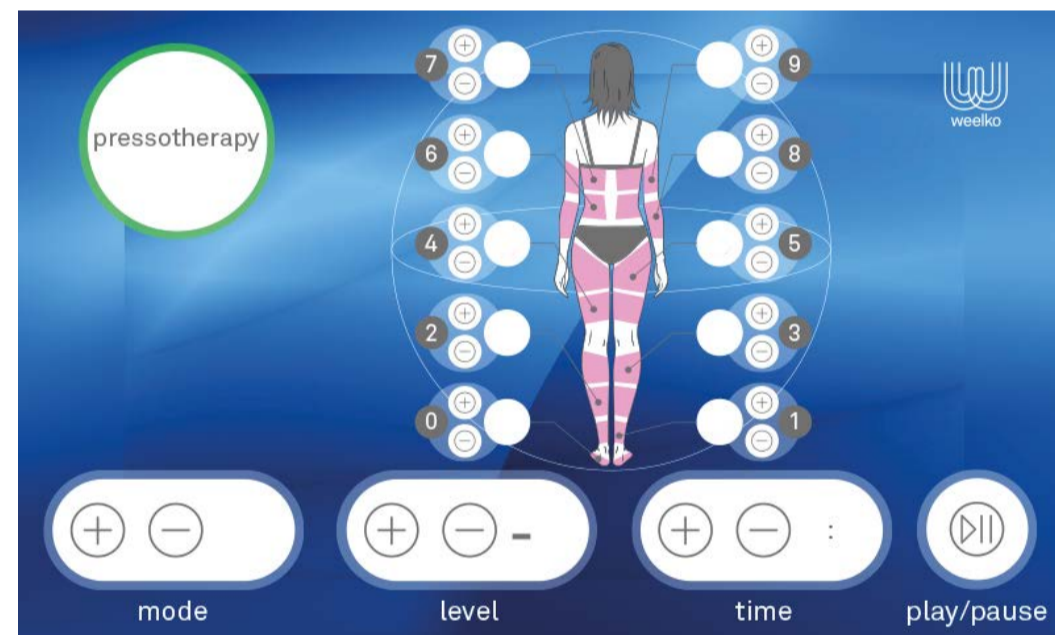

VORSICHT

- Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Teile vom Anzug nicht zu fest umwickeln, damit die Patienten bei zu starkem Luftdruck nicht verletzt werden.
- Kontrollieren Sie, dass alle Schläuche richtig angeschlossen sind.
- Der Luftdruck darf nicht zu hoch eingestellt werden, um Schmerzen zu vermeiden.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, muss eine Fachkraft anwesend sein um den Betrieb zu überwachen.
- Verwenden Sie einen Schutz aus Zellulose unter dem Pressotherapie Anzug, um die Hygienebedingungen zu garantieren.

ZUBEHÖR

- RECHTE BEINE
- LINKE BEINE
- RECHTER ARM
- LINKER ARM
- RECHTER FUß
- LINKER FUß
- HÜFTE
- KABEL FÜR DECKE
- SCHLÄUCHE
- HAUPT-EINHEIT
- VERSORGUNGSLEITUNG

WARNUNG

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.
- Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.
- Dieses Gerät darf nicht mit schwangeren Frauen, Patienten mit Epilepsie, Patienten mit Herzschrittmacher oder Hautinfektion verwendet werden.

EC-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

RECYCLING

Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.

WARTUNG

- Die Schläuche sorgfältig ein- und ausschalten, um deren Lebensdauer zu verlängern. Jedoch verfügt das Gerät über eine Decke, um vermeiden zu können, die Schläuche jedes Mal ein- und ausschalten zu müssen. Stecken Sie nur das Hauptkabel im Hinterteil des Gerätes ein und aus.
- Den Anzug mit einem feuchten Tuch nach jeder Behandlung reinigen.

DATENBLATT

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gewicht und Abmessungen | Verpackungsgröße (cm) | 66x45x40 |
| | Bruttogewicht (kg) | 18,5 |
| | Produktabmessungen (cm) | 34x38x15 |
| Technische Daten | Leistung | 50 W |
| | Luftdruck | 0-0,4 kg/cm ² |
| | Luftstrom | 0-40 L/min. |
| | Luftdruck Rhythmus | 0-15 s. |
| | Luftkammer | 10 (20 bags) |
| Elektrische Daten | Nennspannung | 220V ~ 240V |
| | Frequenz | 50Hz/60Hz |
| | Nennleistung | 50 W |



IT

WKB001
Manuale d'istruzioni
WE-2020-WKB001-1

PRESSOTERAPIA



L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio. L'Azienda si riserva, inoltre, il diritto di modificare o correggere informazioni sulle apparecchiature senza previo avviso. Qualora si dovessero riscontrare errori nelle presenti istruzioni, vi preghiamo di inviarci un'e-mail al fine di correggerli.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

• I presenti elementi potrebbero essere soggetti a modifiche senza previo avviso.

• L'aspetto del prodotto potrebbe differire dall'immagine.

| N° | PRODOTTO | QUANT |
|----|------------------------------|-------|
| 1 | GAMBALE DESTRO | 1 |
| 2 | GAMBALE SINISTRO | 1 |
| 3 | BRACCIALE DESTRO | 1 |
| 4 | BRACCIALE SINISTRO | 1 |
| 5 | PIEDE DESTRO | 1 |
| 6 | PIEDE SINISTRO | 1 |
| 7 | ADDOME | 1 |
| 8 | COPERTA CAVO | 1 |
| 9 | TUBI | 1 |
| 10 | UNITÀ PRINCIPALE | 1 |
| 11 | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 1 |

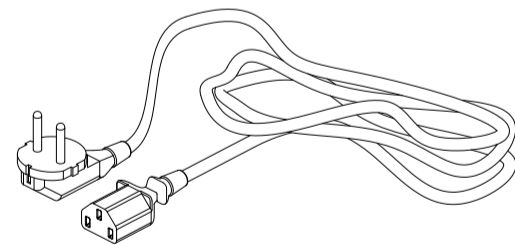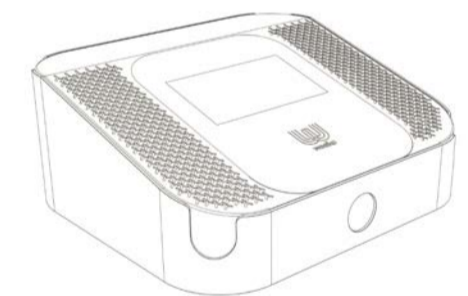

AVVERTENZE

• Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.

• Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, onde evitare eventuali danni alle componenti elementi elettriche.

• Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.

• Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al proprio distributore per evitare qualsiasi rischio.

• Non provare a separare il generatore in acciaio inossidabile della sua fodera di gomma (manico); qualsiasi tentativo potrebbe danneggiare irreparabilmente il generatore.

• Non utilizzare l'apparecchio su donne in gravidanza, pazienti con epilessia, pazienti con dispositivo di controllo della frequenza cardiaca (pacemaker) o pazienti con infezioni cutanee.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il presente prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EC

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EC

RICICLAGGIO

 Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente.

ISTRUZIONI D'USO

1. Inserire il cavo di alimentazione nel pannello posteriore.

2. Collegare correttamente i tubi sul pannello posteriore. Seguire le istruzioni numeriche.

3. Collocare la coperta con i cavi su una superficie piana in modo che il paziente possa sdraiarsi. Coprire la coperta con carta usa e getta per garantire adeguate condizioni igieniche.

4. Avvolgere le diverse parti della tuta attorno al corpo dell'utente. Ricorda di usare una tuta monouso sotto la tuta di pressoterapia.

5. Attivare il pulsante sul pannello frontale e fare clic sul logo Weelko sullo schermo per procedere alla selezione dei menu desiderati.

6. Il menu "MODE" consente di scegliere uno dei quattro programmi. Si consiglia di iniziare con il programma C, dopodiché scegliere gli altri programmi in base alle esigenze del paziente.

Il programma A gonfia dalla zona 0 alla zona 9. Sgonfia la zona 0 quando si

modo indipendente. È necessario soltanto premere il pulsante relativo alla zona da regolare, e regolarne l'intensità usando i tasti "+" e "-".

7. Il menu "LEVEL" consente di regolare l'intensità di gonfiaggio in tre livelli.

8. Il menu "TIME" consente di scegliere la durata del trattamento. La durata predefinita è di 30 minuti.

9. Selezionare "PLAY/PAUSE" per iniziare o sospendere il trattamento.

MANUTENZIONE

• Collegare e scollegare con cura i tubi per prolungarne la durata. In ogni caso, l'apparecchio è dotato di una coperta per riporre i cavi, al fine di evitare di collegare e scollegare i cavi di volta in volta. Collegare e scollegare solo il cavo generale sul retro.

• Pulire la tuta con un panno umido dopo ogni trattamento.

ATTENZIONE

• Prestare attenzione a non regolare la pressione dell'aria in maniera troppo forte perché potrebbe essere doloroso per il paziente.

• Verificare sempre che i tubi siano collegati correttamente.


• L'estetista dovrà controllare l'apparecchiatura per tutto il tempo mentre è in funzione.

• La pressione dell'aria non dev'essere troppo alta, per evitare di provocare dolore.

• Utilizzare una protezione in cellulosa sotto la tuta di pressoterapia per garantire condizioni igieniche adeguate.

ACCESSORI

| DESCRIZIONE |
|--------------------|
| GAMBALE DESTRO |
| GAMBALE SINISTRO |
| BRACCIALE DESTRO |
| BRACCIALE SINISTRO |
| PIEDE DESTRO |
| PIEDE SINISTRO |
| ADDOME |
| TUBI |

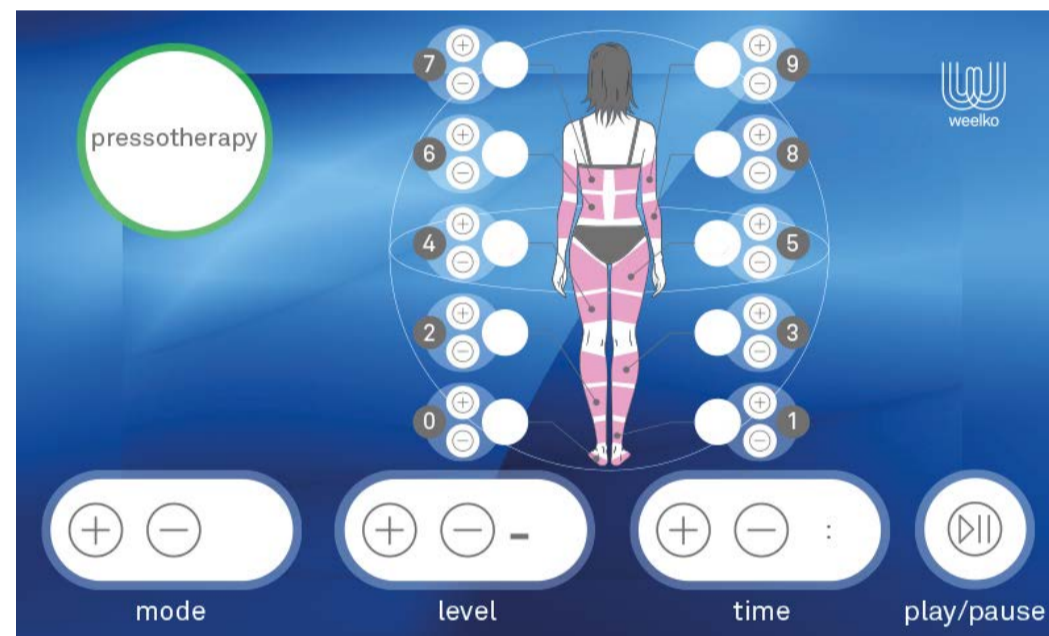

gonfia la 1, sgonfia la zona 1 quando si gonfia la 2, e così via da un'estremità all'altra. Infine, si gonfia dalla zona 0 alla 9 contemporaneamente, e si ripete il programma.

Il programma B gonfia dalla zona 0 alla zona 9. Sgonfia la zona 0 quando si gonfia la 2, sgonfia la zona 1 quando si gonfia la 3, e così via da una parte all'altra. Infine, si gonfia dalla zona 0 alla 9 contemporaneamente, e si ripete il programma.

Il programma C gonfia dalla zona 0 alla zona 9. Inizia a gonfiarsi dalla zona 0 ed aggiunge la zona 1, seguita dalla zona 2, e così via si aggiungono le zone al processo di gonfiaggio. Infine, si ripete il programma.

Il programma D gonfia tutte e tre le aree contemporaneamente: gambe, addome e braccia, dall'estremità verso la parte superiore.

Se si preferisce lavorare su aree indipendenti senza utilizzare alcun programma, l'apparecchio consente di selezionare ciascuna parte della tuta e di regolarne la rispettiva intensità di gonfiaggio in

SCHEDA TECNICA

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Peso e dimensioni | Dimensioni imballaggio (cm) | 66x45x40 |
| | Peso lordo (Kg) | 18,5 |
| | Dimensioni unità principale (cm) | 34x38x15 |
| Caratteristiche di lavoro | Potenza di lavoro | 50 W |
| | Pressione dell'aria | 0-0,4 kg/cm ² |
| | Flusso d'aria | 0-40 L/min. |
| | Ritmo di pressione dell'aria | 0-15 s. |
| | Canali dell'aria | 10 canali e 20 camere d'aria |
| Caratteristiche elettriche | Voltaggio nominale | 220V ~ 240V |
| | Frequenza | 50Hz/60Hz |
| | Potenza nominale | 50 W |